


● SCHLEIFSCHEIBEN

In jeder Hinsicht eine runde Sache

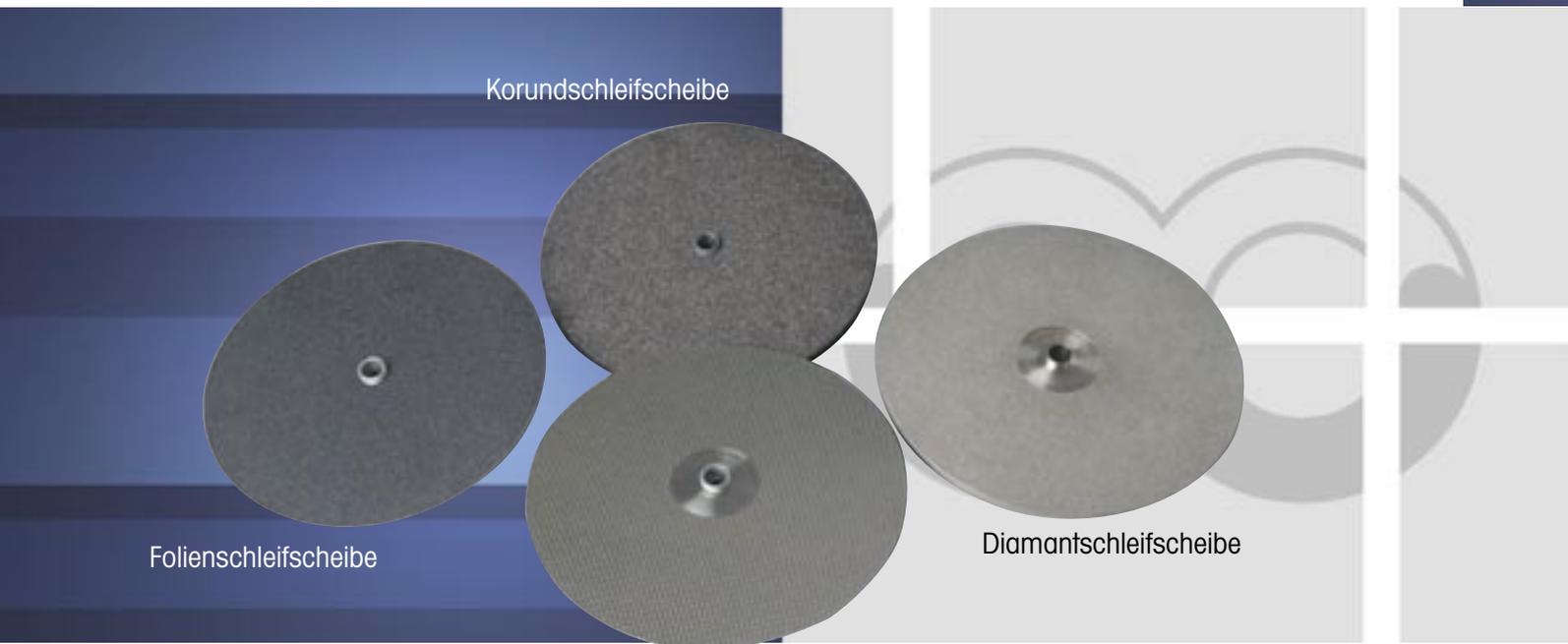

Korundsleifscheibe

Folienschleifscheibe

Diamantsleifscheibe

Dia-Quick-Sleifscheibe,
teildiamantiert

Technische Informationen

Experten wissen: Wassermann-Sleifscheiben setzen Standards. Für jede Gipshärte erhältlich, bieten sie dem Anwender erstklassige Qualität für höchste Ansprüche. Von der vielseitigen Folien- bis hin zur von Wassermann entwickelten Diamant-Sleifscheibe – unsere Erfahrung ist Ihre Sicherheit. Mit weniger sollten Sie sich erst gar nicht zufrieden geben.

Die Folienschleifscheibe für den HSS-AZ/-ZA und HSS-88

- Silicium-Carbid-Beschichtung – beidseitig verwendbar
- flexible, standfeste Ausführung
- elektronisch gewuchteter Stützträger
- Scheibe nicht mit Träger verklebt, daher problemlos austauschbar
- leichter und schneller Wechsel verbrauchter Scheiben

Die Korundsleifscheibe für den HSS-88

- ca. 10 mm starke Silicium-Carbid-Beschichtung
- selbstregenerierend, dadurch konstant starke Schleifleistung über lange Zeit
- zur maximalen Sicherheit auf der gesamten Fläche mit Träger verklebt
- absolut vibrationsfrei da elektronisch gewuchtet

Diamantsleifscheiben, siehe Rückseite

● Gipstrimmer inkl. Schleifscheiben

HSS-99 inkl. Diamantschleifscheibe	Artikel Nr.: 164998
HSS-88 inkl. Diamantschleifscheibe	Artikel Nr.: 168998
HSS-88 inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 168996
HSS-88 inkl. Korundschleifscheibe	Artikel Nr.: 168999
HSS-88 inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 168991
HSS-AZ inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 162997
HSS-AZ inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 162996
HSS-ZA inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	Artikel Nr.: 161996
HSS-ZA inkl. Folienschleifscheibe	Artikel Nr.: 161997



HSS-99



HSS-88



HSS-AZ



HSS-ZA


Schleifscheibe	Artikel Nr.:
Ersatz-Diamantschleifscheibe für HSS-99, ganzflächig diamantiert, inkl. Abzieher und Fett	164063
Ersatz-Diamantschleifscheibe für HSS-88, ganzflächig diamantiert, inkl. Abzieher und Fett	168063
Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe für HSS-88 / -AZ / -ZA, teildiamantiert, inkl. Fett	162063
Ersatz-Korundschleifscheibe für HSS-88, 10 mm stark, inkl. Abzieher und Fett	168024
Ersatz-Folienschleifscheibe für HSS-88 / -AZ / -ZA, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162013
Ersatz-Folienschleifscheibe, fein, für HSS-88 / -AZ / -ZA, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162023
Umrüstsatz für HSS-88 für Dia-Quick- und Folienschleifscheibe, inkl. Dichtfett und Abzieher für Schleifscheibenwechsel	168071

Mit den Diamant-Schleifscheiben lassen sich selbst härteste Gipse spielend leicht trimmen – mit wenig Druck, aber viel Zeitersparnis.

Die Dia-Quick-Schleifscheibe für den HSS-AZ/-ZA und HSS-88

- segment-diamantiert, aufgebracht in Inselform
- maximale Sicherheit durch elektronisch gewuchteten Stützträger

Diamantschleifscheibe

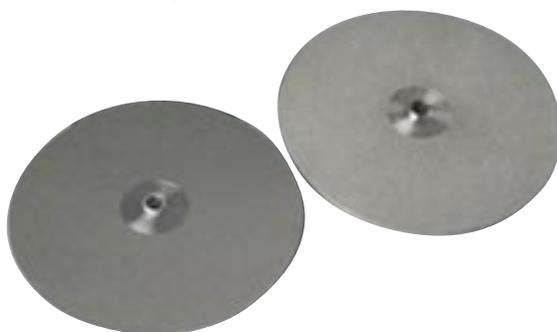

Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert

Die Diamant-Schleifscheibe für den HSS-88 und HSS-99

- volldiamantiert für seidig-glatte Oberflächen – trotz der aggressiven Schleifleistung immer plane Modellflächen
- Grob- und Feinschliff in einem Arbeitsgang
- extrem lange Lebensdauer – flächen-deckend stützen sich die Diamanten gegenseitig und sind so vor dem Ausbrechen geschützt
- hervorragende Einsatzmöglichkeiten in der KFO

Änderungen vorbehalten

www.wassermann-dental.com