

● **POLIEREINHEIT****WP-Ex 10 II**

Die kleine Lösung für den großen Anspruch



Technische Informationen

Kompakt, kräftig und richtig schick: Die Poliereinheit WP-Ex 10 II ist die perfekte Lösung für erstklassiges Polieren und Absaugen auf kleinstem Raum. Neben ihrem durchzugsstarken, langlebigen und wartungsfreien Kurzschlussläufermotor überzeugt sie zusätzlich auch durch eine leistungsstarke und geräuscharme Absaugung – und das bei kompakten Abmaßen. Für ein entspanntes Arbeiten und den richtigen Durchblick sorgen die Tageslicht LED-Ausleuchtung und der hochwertige Sicherheitsglas-Sichtschutz. Besonders praktisch für die Reinigung: Der Poliertrog aus Gummi lässt sich schnell und sehr einfach entfernen. Ein Not-Ausschalter und Wiederanlaufschutz garantieren Arbeitssicherheit.

- kompakte und leistungsstarke Poliereinheit für den täglichen Laboreinsatz auf kleinstem Raum
- durchzugsstarker, langlebiger und wartungsfreier Kurzschlussläufermotor
- 2 Schaltstufen, 1.500 bzw. 3.000 min⁻¹
- Mikro-Feinstaub-Filtertasche mit großer Kapazität, leicht auswechselbar
- mantelgekühlter Motor, staubgeschützt
- schlagfester, einstellbarer Sicherheitsglas-Sichtschutz
- integrierte Tageslicht LEDs
- zusätzlicher Tageslicht LED-Spot als Sonderzubehör erhältlich
- hochwertige Verarbeitung, nahezu komplett aus Edelstahl gefertigt

● Technische Daten und Zubehör


WP-Ex 10 II	Artikel Nr.: 146971
Spannung*	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme Gerät	2,2 A
Leistung	500 W
Lüfter	445 m ³ / h (freiblasend)
Maße B x H x T	455 x 485 x 505 mm
Gewicht	37 kg
Schallpegel	≤ 65 dB (A)
Drehzahl	1500 / 3000 min ⁻¹

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Bürstenspindel rechts	152022
Poliertrog	146503
Zuleitung	592012
Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)	830409
Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)	395004
Mikro-Feinstaub-Filtertasche	---

Zubehör	Artikel Nr.:
Bürstenspindel rechts	152022
Bürstenspindel 125 mm rechts	152043
Steinhalter rechts	152056
Bohrfutter rechts 1-6 mm spannend	152049
Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)	830409
Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)	395004
Ersatz Mikro-Feinstaub-Filter- tasche, 1 Satz = 2 Stück	611005
Ansaugschutzgitter, 1 Stück	146396
Tageslicht LED-Spot	146390

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

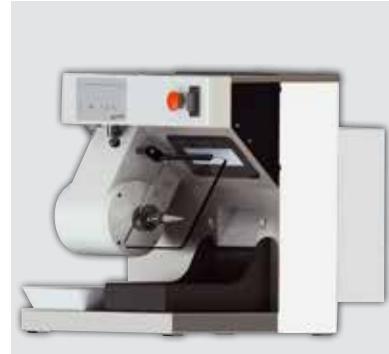

WP-Ex 10 II mit Sonderzubehör Tageslicht LED-Spot

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kompakte und leistungsstarke Poliereinheit
- durchzugsstarker, langlebiger und wartungsfreier Kurzschlussläufermotor
- großzügige und leicht austauschbare Mikro-Feinstaub-Filtertasche
- geräuscharme Absaugung
- Arbeitsbereich komplett aus Edelstahl gefertigt
- leicht zu reinigen
- diverse Ablagemöglichkeiten
- Not-Ausschalter und Wiederanlaufschutz garantieren Arbeitssicherheit

www.wassermann-dental.com