

● DOSIER-UND MISCHGERÄT SIDOMIX

Mit Köpfchen zur richtigen Mischung



Technische Informationen

Perfekte Mischung auf Knopfdruck: Mit dem Sidomix wird das Mischen und Dosieren für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone jetzt zum Kinderspiel. Denn mit einem einfachen Knopfdruck werden die gewünschten Komponenten 1:1 gemischt und richtig dosiert – vollautomatisch, absolut homogen und dabei vollkommen blasenfrei. Das Geheimnis liegt im innovativen Mischkopf: Durch seine räumlich voneinander getrennten Austrittsöffnungen ist ein Vermischen der Komponenten ausgeschlossen – selbst beim Befestigen und Entfernen der Mischkanülen. Praktisch in der Anwendung: Die Behältnisse für die A- und B-Komponenten lassen sich durch Schnellkupplungen besonders einfach am Gerät aufsetzen.

- automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone
- Komponenten werden auf Knopfdruck 1:1 gemischt und dosiert, homogen und blasenfrei
- material- und zeitsparend durch verlustfreies Befüllen mehrerer Küvetten mit einer Mischkanüle
- praktische Adapter mit Schnellkupplung für einfaches Aufsetzen von 1 kg- und 6 kg-Gebinden, für 6 kg und 25 kg-Gebinde Auflagegestell erhältlich
- Fußschalter optional erhältlich
- befüllbare Materialbehälter mit Schnellkupplung für die Komponenten A und B im Lieferumfang enthalten

● Technische Daten und Zubehör


Sidomix	Artikel Nr.: 172984
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,6 A
Leistung	260 W
Maße B x H x T inkl. Bügel	290 x 310 x 450 mm
Maße B x H x T ohne Bügel	200 x 310 x 440 mm
Gewicht	11,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)

Verbrauchsmaterial Dubliersilikon, 1:1	Artikel Nr.:
WaSil soft*, Shore A Härte: 16-18/ WaSil speed**, Shore A Härte: > 24, 2 x 1 kg, Komponente A / B	656060* / 656070**
WaSil soft*, Shore A Härte: 16-18/ WaSil speed**, Shore A Härte: > 24, 2 x 6 kg, Komponente A / B	656061* / 656071**
WaSil soft*, Shore A Härte: 16-18/ WaSil speed**, Shore A Härte: > 24, 2 x 25 kg, Komponente A / B	656062* / 656072**

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Satz Material-Behälter mit Schnellkupplung, 2 x 2 Liter	172640
Mischkanülen, pink, 100 Stück	622002
Zubehör	Artikel Nr.:
Fußschalter	174175
Umbausatz für Fußschalter	172630
Satz Material-Behälter mit Schnellkupplung, 2 x 2 Liter	172640
Auflagegestell klein für Dubliersilikone, 2 x 6 kg-Gebinde	172631
Auflagegestell groß für Dubliersilikone, 2 x 25 kg-Gebinde	172632
Verbindungsschläuche komplett, 2 Stück	172633
Adapter-Set für Dubliersilikone, 2 x 1 kg-Gebinde	172634
Adapter-Set für Dubliersilikone, 2 x 6 kg-Gebinde	172636
Mischkanülen, pink, 100 Stück	622002

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

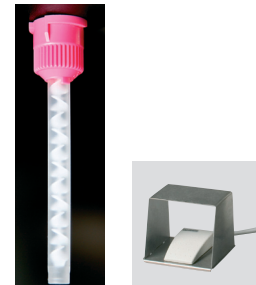

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- speziell empfohlen für die Verwendung von WaSil-Dubliersilikonen
- automatisches Misch- und Dosiergerät für Dubliersilikone
- absolut homogene und blasenfreie Mischung
- Mischkopf mit getrennten Austrittsöffnungen – kein Vermischen der Komponenten möglich
- praktische Adapter mit Schnellkupplung für Silikon-Gebinde A und B
- hochwertige Verarbeitung, Gehäuse kunststoffpulverbeschichtet
- Fußschalter optional erhältlich

www.wassermann-dental.com