

Wamix-Touch: Durch die leistungsstarke und wartungsfreie Vakuumpumpe und die Drehzahlregelung des Rührwerkes eignet sich das Gerät für alle Gipssorten, Einbettmassen und Silikone. Drei Vakuumstufen sind je nach Anwendung einstellbar. Da lediglich ein Stromanschluss benötigt wird, ist die Wahl des Standortes sehr flexibel.

Wamix-Touch Injector: Es eignet sich hervorragend für das Anmischen von Gipsen. Mit diesem Verfahren wird das Vakuum selbst bei großen Volumen sehr schnell erreicht und spart somit Zeit. Ein weiterer Vorteil ist die Robustheit des wartungsfreien Vakuumerzeugers. Ein Druckluftanschluss ist erforderlich.



Wamix-Touch / Wamix-Touch Injector, Wandmontage



Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____

Wamix-Touch und Wamix-Touch Injector



Vakuum-Anrührgeräte



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
 Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
 Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
 info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Vakuum-Anrührgeräte

Wamix-Touch & Wamix-Touch Injector

Die **Wamix**-Geräte von Wassermann überzeugen durch perfekte und blasenfreie Anmischergebnisse. Ihre einfache Bedienung und die extreme Robustheit sorgen zuverlässig für Arbeitserleichterung. Ein Touchscreen und die neu entwickelte Steuerung ermöglichen dem Anwender die relevanten Parameter schnell und einfach festzulegen. Die technologischen Highlights der Wamix-Serie schaffen die Grundlage für erstklassige Objekte – schnell und reproduzierbar.


Hochwertige aus Metall gefertigte Komponenten, nahezu wartungsfrei

Visuelles und akustisches Signal bei Programmende

Optisches Schutzsystem hilft Überfüllung zu erkennen, zusätzlich mit Schutzfilter gegen Einsaugen von Flüssigkeiten

Flexibel als Wand- und Tischgerät einsetzbar, Tischstativ als Zubehör erhältlich

Einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen, kunststoffpulverbeschichtet

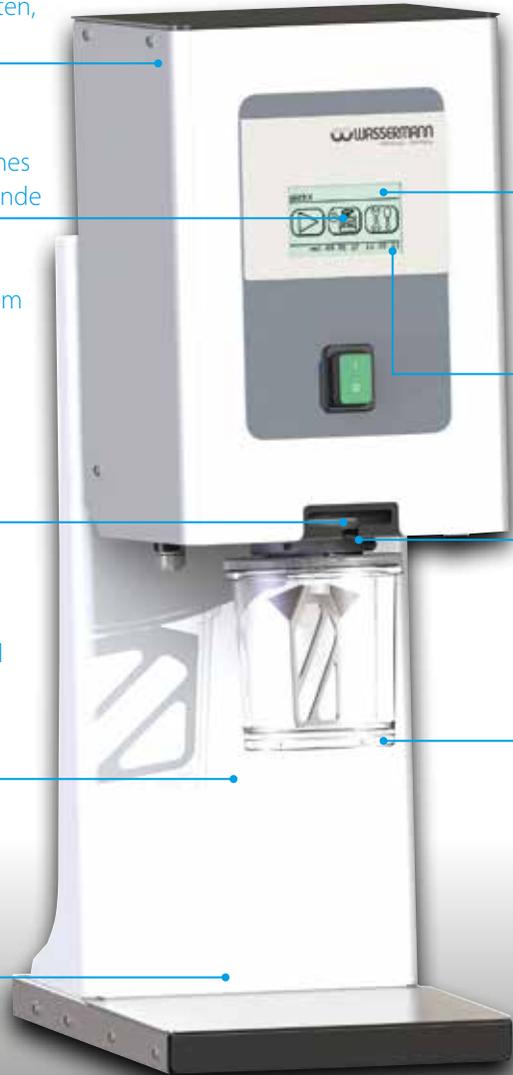

Schnelle und reproduzierbare Prozesse: 30 Programme können individuell benannt und abgerufen werden

Belüftung des Bechers erst nach Bestätigung, Nachvakuum reduziert Gaseinschlüsse zusätzlich

Geeigneter Motor zum vereinfachten Ansetzen des Mischbechers, komfortable Einhandbedienung, optimale Rührergebnisse

Automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers, programmierbarer Vorrühr-Modus mit Rechts- und Linkslauf, Drehrichtungswechsel variabel per Menü einstellbar

Eigenschaften

- Innovativ: Die vom Anwender festgelegten Werte für Vakuum und Drehzahl werden mit einem Mikrocontroller gesteuert und automatisch nachgeregelt
- Reproduzierbarkeit auf Knopfdruck: Vakuum- und Drehzahlüberwachung garantieren homogene Mischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonen
- **Im Lieferumfang enthalten:**
 - Becher mittel kpl. 350 ml
 - Befestigungsset Wandmontage
 - Druckluftschlauch, 2 m **Wamix-Touch Injector**

| Zubehör | Artikel Nr. |
|--|-----------------------------|
| Tischstativ (B 205 x H 445 x T 275 mm) | 171744 |
| Becher extra klein kpl. 75 ml | 171295 |
| Becher klein kpl. 200 ml | 171230 |
| Becher mittel kpl. 350 ml | 171283 |
| Becher groß kpl. 600 ml | 171237 |
| Becher extra groß kpl. 1000 ml | 171269 |
| Vakuum-Wässerungsbecher 600 ml | 171275 |
| Druckluftschlauch per lfd. Meter Wamix-Touch Injector | 320026 |
| Wamix-Touch | Artikel Nr. 171970 |
| Wamix-Touch Injector | Artikel Nr. 171971 |
| Spannung | 220–240 V / 50/60 Hz |
| Stromaufnahme max. Wamix-Touch | 2,5 A (Si 4,0 A) |
| Stromaufnahme max. Wamix-Touch Injector | 1,8 A (Si 4,0 A) |
| Leistung Wamix-Touch | 200 W |
| Leistung Wamix-Touch Injector | 120 W |
| Drehzahl (Motorsteuerung mit intelligenter Regelung) | 100 - 550 min ⁻¹ |
| Vakuum Wamix-Touch | ca. 120 mbar (absolut) |
| Vakuum Wamix-Touch Injector | ca. 100 mbar (absolut) |
| Mischzeit | 999 Sek. einstellbar |
| Maße B x H x T | 195 x 310 x 180 mm |
| Gewicht Wamix-Touch | 9,3 kg |
| Gewicht Wamix-Touch Injector | 7,5 kg |
| Schallpegel | ≤ 80 dB (A) |
| Schutzklasse | IP 22 |
| Druckluftanschluss Wamix-Touch Injector | min. 5 bar |