


Zusatztank



Gobi-3

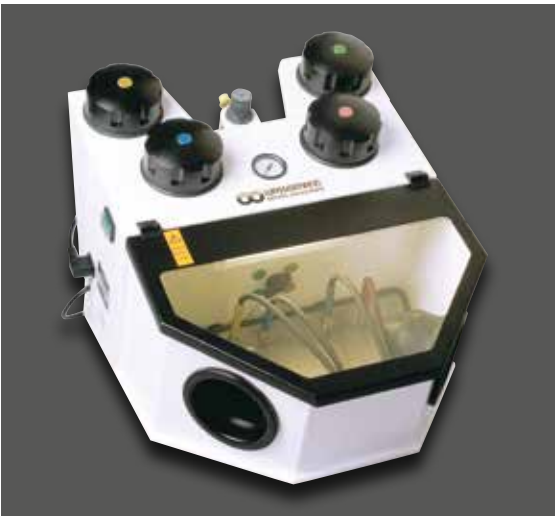

Gobi-4

## Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

## Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_

## Gobi-2, Gobi-3, Gobi-4



## Feinstrahler



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
[info@wassermann-dental.com](mailto:info@wassermann-dental.com) · [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)

# Feinstrahler

## Gobi-2, Gobi-3 & Gobi-4

Der **Gobi-2** erlaubt nicht nur ein besonders effizientes und schnelles Arbeiten, er ist vor allem äußerst flexibel. Denn durch seinen modularen Aufbau lässt sich das Basisgerät um 1 oder 2 Strahlmittelbehälter auf bis zu 4 Kammern erweitern. Ein Gerät mit langer Lebensdauer und hoher Flexibilität: Zum Abstrahlen, Aufrauen oder Glanzstrahlen mit allen gängigen Strahlmitteln und Korngrößen.

**Tip:** Wir empfehlen die Verwendung von Wassermann Strahlmitteln und unsere Niederdruck-Absauganlagen **SG-10**, **SG-1/1** und **SG-1/2 D**.

Präziser Arbeitsdruck von 0,8–6 bar durch Manometersteuerung

Modular erweiterbar auf bis zu 4 Kammern

Einfache Bestimmung des gewünschten Strahlmittels per Drehschalter und Farbleitpunkt

Hochwertig verarbeitet, aus Metall gefertigt, konstruiert für lange Lebensdauer

Schnellentlüftung der Vollmetall-Strahlmittelbehälter für schnelles Nachfüllen und Wechseln des Strahlmittels

Optimale Ausleuchtung, geschützte Leuchtstofflampe

Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformte Griffel



### Eigenschaften

- Auslösen des Strahlvorgangs mit einzigartiger Start-Stopp-Präzision per Fußtaster
- Spart Kosten durch spürbar minimalen Strahlmittelverbrauch
- Hoher Hygienestandard durch austauschbare Durchgreifstulpen
- Spezielle, besonders langlebige Strahlschläuche
- Praktisches Farbleitsystem
- Spezialbeschichtete Schutzscheibe für optimale Sicht
- Mit Gerätesteckdose, z.B. für eine Absauganlage
- **Im Lieferumfang enthalten:**
  - Druckluftschlauch, 2 m Zuleitung
  - Gobi-2** inkl. 2 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot)
  - Gobi-3** inkl. 3 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot) und wahlweise Zusatztank mit Feinstrahldüse links 0,6 (gelb) oder rechts 0,8 (grün)
  - Gobi-4** inkl. 4 Feinstrahldüsen: 0,8 (blau), 1,2 (rot) und Zusatztank, links mit Feinstrahldüse 0,6 (gelb) und Zusatztank, rechts mit Feinstrahldüse 0,8 (grün)

Zubehör	Artikel Nr.
Zusatztank, links mit Feinstrahldüse 0,6 mm (gelb)	190800
Zusatztank, rechts mit Feinstrahldüse 0,8 mm (grün)	190802
Druckluftschlauch per lfd. Meter	320026
Ersatz-Feinstrahldüse 0,6 mm	190550
Ersatz-Feinstrahldüse 0,8 mm	190551
Ersatz-Feinstrahldüse 1,2 mm	190552

Gobi-2	Artikel Nr. 190896
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme	max. 8 A
Leistung	50 W
Maße B x H x T	430 x 350 x 530 mm
Gewicht	17,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Tankinhalt	800 cm <sup>3</sup> = 1,2 kg
Druckluftanschluss	3–6 bar
Arbeitsdruck	0,8–6 bar
Absaugstutzen	Ø 75 mm außen