

Absaug-Box Compact II, Standardausführung mit seitlichen Eingriffsöffnungen, geräumigem Innenvolumen und einem hinteren Absaugstutzen



Absaug-Box Compact II mit Zubehör Satz Schutzblenden mit Durchgreifstulpen und separaten Öffnungen für das Handstück



Absaug-Box Compact II mit Zubehör Satz Armauflagen für ermüdungsfreies Arbeiten

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachbaltigkeit sind dabei

und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Absaug-Box Compact II



Absaugbox

WASSERMANN



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg

☐ Ihr Ansprechpartner -		




Wassermann Dental-Maschinen GmbH Rudorffweg 15–17 · 21031 Hamburg · Deutschland Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24 info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Absaugbox

Absaug-Box Compact II

Die Absaug-Box Compact II ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten, und erfüllt damit zeitgemäße Anforderungen an Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Denn ohne störende Einflüsse von Staub, Splittern oder Dämpfen erlaubt sie dem Anwender ein ebenso effizientes wie auch entspanntes Arbeiten direkt am Objekt. Auf Wunsch können die Eingriffsöffnungen zusätzlich mit Schutzblenden aus Metall verschlossen werden. Ein besonderer Pluspunkt sind hierbei die beidseitigen, separaten Öffnungen für das Handstück und die Durchgreifstulpen mit viel Bewegungsfreiraum und hohem Hygienestandard.

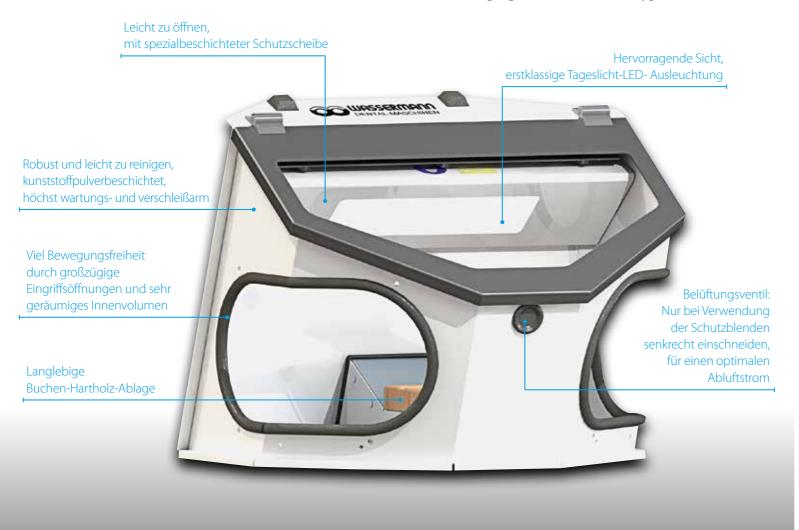

Eigenschaften

- Ergonomische Form für optimale Körperhaltung
- Hoher Sicherheitsstandard: Schutz vor Splittern, Staub und Dämpfen
- Kipp- und rutschfest
- Qualitätslupe, Armauflagen und Schutzblenden als Zubehör erhältlich
- Optimal abgestimmt auf die Kombination mit unseren Niederdruck-Absauganlagen SG-10, SG-1/1 und SG-1/2 D
- Im Lieferumfang enthalten:

Absaug-Box Compact II inkl. Tageslicht-LED-Beleuchtung und 1 Absaugstutzen hinten

Auf Anfrage ist die Absaug-Box mit einem vorderen Absaugstutzen erhältlich.

Zubehör	Artikel Nr.
Lupe	143251
Satz Armauflagen	143303
Satz Schutzblenden	143305
Diverse Übergangsstücke Ø 75 mm innen auf Anfrage erhältlich	

Absaug-Box Compact II	Artikel Nr.143370
Spannung	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,1 A
Leistung	15 W
Maße B x H x T	370 x 310 x 345 mm
Gewicht	5,5 kg
Absaugstutzen	Ø 75 mm außen, hinten (auf Anfrage erhältlich: Ø 60 mm außen, vorne)