

## ● WACHSAUSBRÜHAUTOMAT WAPO-EX 8 III

Kompakt im Format, groß in der Leistung



### Technische Informationen

Kompakt, ausgereift, langlebig: Der Wapo-Ex 8 ist die ideale Lösung, wenn der Platz beschränkt, aber der Anspruch groß ist. Bis zu 8 Küvettenhälften werden gleichzeitig und vollautomatisch ausgebrüht. Vielseitige Funktionen und reproduzierbare Arbeitsabläufe bei einfachster Programmierung ermöglicht dabei das ausgereifte Touchscreen-Multifunktionsdisplay. Erstklassige Verarbeitung, besonders hochwertige und wartungsfreie Bauteile sowie die elektronische Wassermangelanzeige garantieren zusätzlich maximale Sicherheit, geringen Pflegeaufwand und eine hohe Lebensdauer. Anwenderfreundlich: Der Spritzschutz und die integrierte Handbrause zum manuellen Ausbrühen auf dem tiefliegenden Lochsiebdeckel.

- kompaktes Tischgerät zum Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften
- informatives Touchscreen-Multifunktionsdisplay mit vielseitigen Funktionen bei einfacher Handhabung
- thermostatgeschützte, dichtungsfreie Tauchpumpe aus Bronze; wartungsfrei
- energiesparende Behälter-Thermoisolierung
- in den Seitenwänden versenktes Sprühsystem für freien Zugang zu den Küvettenkörben
- komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- optische und akustische Wassermangelanzeige
- leicht und werkzeugfrei zu reinigen

# Technische Daten und Zubehör


Wapo-Ex 8 III	Artikel Nr.: 170981
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T	610 x 540 x 420 mm
Gewicht	42,0 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	18,5 l

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Service-Paket (Filter, Kalklöser, Wachslöser)	170021
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") -1,5 m	320030
Schlauchschelle D20 - 32 x 12,2	322017

Zubehör	Artikel Nr.:
Service-Paket (Filter, Kalklöser, Wachslöser)	170021
Fahrbares Untergestell	170120
PVC-Schlauch 19 x 4 (3/4") per lfd. Meter	320030

\*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

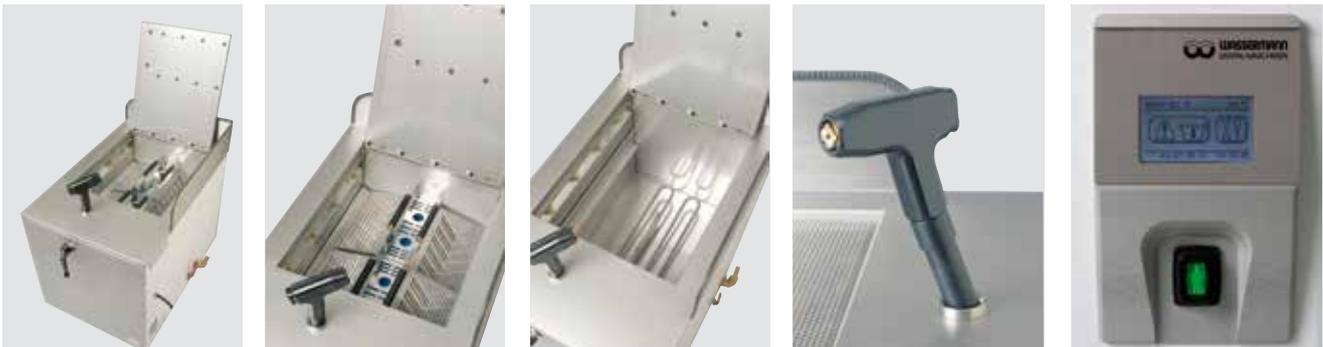

## Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kompaktes Ausbrühen von bis zu 8 Küvettenhälften
- vielseitiges Touchscreen-Multifunktionsdisplay
- einfache Handhabung
- langlebig und energiesparend
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- integrierte Handbrause und Spritzschutz

[www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)