

Timobil
inkl. Zubehör
Saughaube mit
Beleuchtung



Timobil
inkl. Zubehör
Saughaube



Extrem
leistungsstarkes
Motor-Handstück mit
einer gleichmäßigen
Drehzahl und einer
überragenden
Laufruhe

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.wassermann.hamburg



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner _____

Timobil



Absauganlage



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

Absauganlage **Timobil**


Mobiler Absaugtisch inkl. Technikmaschine

Mit dem **Timobil** verfügen Sie über ein mobiles Absauggerät mit robuster Technikmaschine, das in Praxis und Labor keine Wünsche offen lässt: Durch eine Einschaltautomatik lässt sich das Timobil besonders praktisch über das ergonomische und vibrationsfreie Motor-Handstück starten - variabel und besonders saugstark.

Abnehmbare Schutzscheibe vor dem Arbeitsbereich

Automatisches Starten der Absauganlage über das Motor-Handstück mit hoher Rundlaufgenauigkeit und bürstenlosem Motor

Mobiles, höchst wartungs- und verschleißarmes Absauggerät für Praxis und Labor mit langer Laufzeit dank kollektorlosem Motor

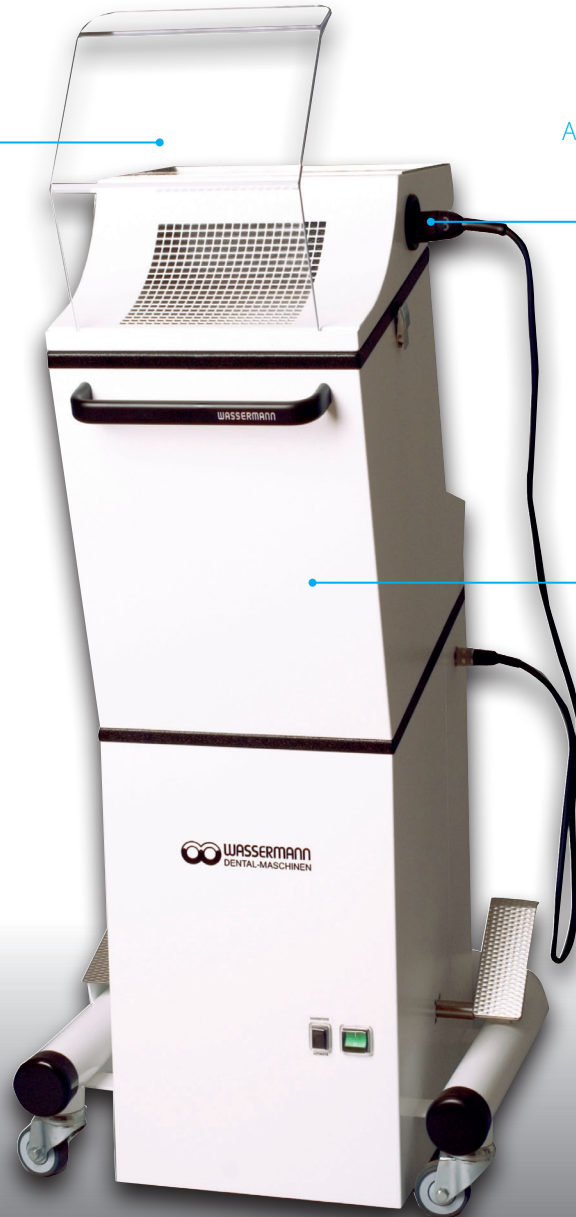

Eigenschaften

- Konzipiert nach dem Niederdruckprinzip: Keine Wärmeabführung, kein Auskühlen der Hände, hohes Absaugvolumen, nahezu lautlos
- Hoher Schutz durch Nachlaufautomatik der Absauganlage
- Hochwertige, schnell auszutauschende Filtertasche
- Nachträgliche Montagemöglichkeit des Zubehörs Saughaube mit oder ohne Beleuchtung
- **Im Lieferumfang enthalten:**
 - Motor-Handstück
 - Handstückablage
 - Schutzscheibe, Acrylglas
 - Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M

Zubehör	Artikel Nr.
Saughaube inkl. Beleuchtung	149140
Saughaube	149130
Ablagetablett	149010
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M, 1 Satz = 4 Stück	611010
Ersatz-Filtertasche Gips (weiß), Kl.1 / Kl. 2, 1 Satz = 4 Stück	611018

Timobil	Artikel Nr.149999
Spannung	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	1,5 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme	max. 8 A
Leistung	350 W
Maße B x H x T	530 x 900 x 480 mm
Gewicht	28,1 kg
Saugleistung	500 m ³ / h (freiblasend)
Leistung Steuergerät	160 W
Leistung Handstückmotor	95 W
Drehzahl Handstückmotor	1000 - 40 000 min ⁻¹
Betriebsart	S6 (4 min. / 10 min.)