


Wamix-Touch: Durch die leistungsstarke und wartungsfreie Vakuumpumpe und die Drehzahlregelung des Rührwerkes eignet sich das Gerät für alle Gipssorten, Einbettmassen und Silikone. Drei Vakuumstufen sind je nach Anwendung einstellbar. Da lediglich ein Stromanschluss benötigt wird, ist die Wahl des Standortes sehr flexibel.

Wamix-Touch Injector: Mit diesem Verfahren wird das Vakuum selbst bei großem Volumen sehr schnell erreicht und spart somit Zeit. Der öl- und wartungsfreie Vakuumerzeuger erreicht zuverlässig einen hohen Wirkungsgrad. Ein Druckluftanschluss ist erforderlich.



Wandmontage, Befestigungsset im Lieferumfang enthalten

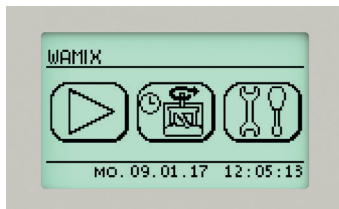

Touchscreen für schnelle und einfache Handhabung



1000 ml, 600 ml, 350 ml, 200 ml und 75 ml

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____

Wamix-Touch und Wamix-Touch Injector



Vakuum-Anrührgeräte




Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Vakuump-Anrührgeräte

Wamix-Touch & Wamix-Touch Injector

Die **Wamix**-Geräte von Wassermann überzeugen durch perfekte und blasenfreie Anmischergebnisse. Ihre einfache Bedienung und die extreme Robustheit sorgen zuverlässig für Arbeitserleichterung. Ein Touchscreen und die neu entwickelte Steuerung ermöglichen dem Anwender die relevanten Parameter schnell und einfach festzulegen. Die technologischen Highlights der Wamix-Serie schaffen die Grundlage für erstklassige Objekte – schnell und reproduzierbar.

Innovativ: Die vom Anwender festgelegten Werte für Vakuum und Drehzahl werden mit einem Mikrocontroller gesteuert und automatisch nachgeregelt.

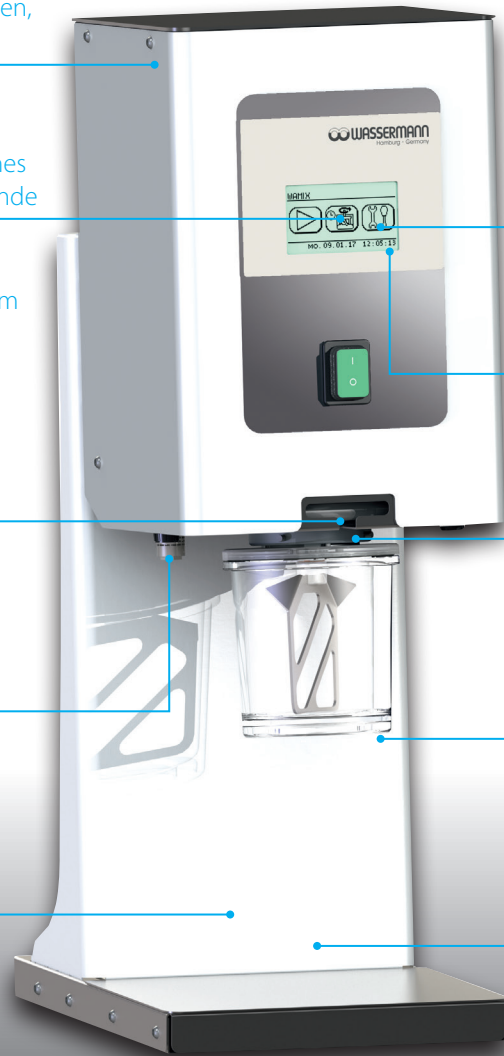

Hochwertige aus Metall gefertigte Komponenten, nahezu wartungsfrei

Visuelles und akustisches Signal bei Programmende

Optisches Schutzsystem hilft Überfüllung zu erkennen, zusätzlich mit Schutzfilter gegen Einsaugen von Flüssigkeiten

Schalldämpfer Wamix-Touch-Injector (Wamix-Touch: Schalldämpfer im Gerät integriert)

Flexibel als Wand- und Tischgerät einsetzbar, Tischstativ als Zubehör erhältlich

Schnelle und reproduzierbare Prozesse: 30 Programme können individuell benannt und abgerufen werden

Belüftung des Bechers erst nach Bestätigung, Nachvakuum reduziert Gaseinschlüsse zusätzlich

Geeigneter Motor zum vereinfachten Ansetzen des Mischbechers, komfortable Einhandbedienung, optimale Rührergebnisse

Automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers, programmierbarer Vorrühr-Modus mit Rechts- und Linkslauf, Drehrichtungswechsel variabel per Menü einstellbar

Einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen, kunststoffpulverbeschichtet

Eigenschaften

- Reproduzierbarkeit auf Knopfdruck: Vakuum- und Drehzahlüberwachung garantieren homogene Mischergebnisse bei allen Gipsorten, Einbettmassen und Silikonem
- **Im Lieferumfang enthalten:**
 - Becher mittel kpl. 350 ml
 - Befestigungsset Wandmontage
 - Druckluftschlauch, 2 m **Wamix-Touch Injector**

Zubehör	Artikel Nr.
Tischstativ (B 208 x H 450 x T 275 mm)	171744
Becher extra klein kpl. 75 ml	171295
Becher klein kpl. 200 ml	171230
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Becher groß kpl. 600 ml	171237
Becher extra groß kpl. 1000 ml	171269
Vakuum-Wässerungsbecher 600 ml	171275
Druckluftschlauch per lfd. Meter Wamix-Touch Injector	320026
Wamix-Touch	Artikel Nr. 171970
Wamix-Touch Injector	Artikel Nr. 171971
Spannung	100–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme max. Wamix-Touch	0,44 A (Si 4,0 A)
Stromaufnahme max. Wamix-Touch Injector	0,17 A (Si 4,0 A)
Leistung Wamix-Touch	94 W
Leistung Wamix-Touch Injector	40 W
Drehzahl (Motorsteuerung mit intelligenter Regelung)	100 - 550 min ⁻¹
Vakuum Wamix-Touch	ca. 120 mbar (absolut)
Vakuum Wamix-Touch Injector	ca. 100 mbar (absolut)
Mischzeit	999 Sek. einstellbar
B x H' x T max. (Wandmontage)	200 x 310 x 200 mm
B x H x T max. (inkl. Stativ)	210 x 590 x 300 mm
Gewicht Wamix-Touch	9,3 kg
Gewicht Wamix-Touch Injector	7,5 kg
Schallpegel	≤ 80 dB (A)
Schutzklasse	IP 22
Druckluftanschluss Wamix-Touch Injector	min. 5 bar

*Bei Wandmontage muss mindestens 300-350 mm Freiraum unter dem Gerät verbleiben.

Andere Spannungen auf Anfrage · Technische Änderungen vorbehalten · 06/2021