




Handbrause zum manuellen Ausbrühen



Komfortabler Ausbrühvorgang, freier Zugang zu den Küvettenkörben

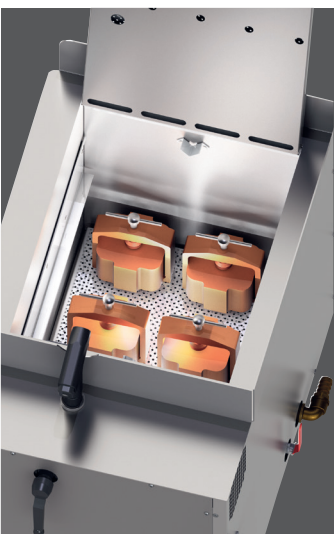

Zuverlässige Polymerisationsergebnisse

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_

### Wapo-Ex 8 Plus



Ausbrüh- und Polymerisationsautomat



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg  
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

# Kombiautomat Wapo-Ex 8 Plus

## Ausbrüh- und Polymerisationsautomat

Der **Wapo-Ex 8 Plus** ermöglicht das automatische Ausbrühen von bis zu 8 Kuvettenhälften oder das Polymerisieren von bis zu 8 Kuvetten im Spanner. Die relevanten Parameter sind auf dem Touchscreen sofort erkennbar, die Eingabe erfolgt intuitiv. Der Anwender kann zahlreiche Varianten der Parameter, zum Beispiel eine Wochenzeitschaltuhr, durch einfachste Programmierung an seine individuellen Bedürfnisse anpassen.



### Eigenschaften

- Kompakter Tischautomat zum Ausbrühen von bis zu 8 Kuvettenhälften oder zum Polymerisieren von bis zu 8 Kuvetten im Spanner
- Thermostatgeschützte, dichtungsfreie Tauchpumpe, wartungsfrei
- Mittig angebrachter Sprühbalken, sehr einfacher Ein-/ Ausbau
- Schneller Wechsel zwischen der Funktion Ausbrühen und der Funktion Polymerisieren
- Optische und akustische Wassermangelanzeige
- Leicht und werkzeugfrei zu reinigen
- **Im Lieferumfang enthalten:**  
Service-Paket (4 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachlöser)  
Abflussschlauch, 1,5 m  
Schlauchselle Ø 20-32 x 12,2

Zubehör	Artikel Nr.
Fahrbares Untergestell (B 620 x H 550 x T 430 mm)	170120
Service-Paket (4 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachlöser)	170021
Abflussschlauch per lfd. Meter	320030

Wapo-Ex 8 Plus	Artikel Nr. 170977
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T max.	660 x 585 x 480 mm
Maße B x H x T (Gehäuse)	615 x 550 x 425 mm
Gewicht	41 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	21 l